

Операционные столы ОК-ЭПСИЛОН

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	

ОУК-01 (ОК-ЭПСИЛОН)



ОУК-01 (ОК-ЭПСИЛОН) стол операционный универсальный

ОУК-01 (ОК-ЭПСИЛОН) – механогидравлический операционный стол, оптимально подходит для оснащения поликлиник, городских и районных больниц.


Операционный стол ОУК-01 (ОК-ЭПСИЛОН) используется при проведении операций общей хирургии. Дополнительные комплекты приспособлений, выпускаемые предприятием, позволяют расширить функциональные возможности стола и проводить другие специализированные операции.

Подъем и опускание панели стола выполняется при помощи гидродомкрата ножной педалью. Органы управления продольными и поперечными наклонами и спинной секцией расположены в одном месте со стороны головы. Наличие встроенных колес дает

возможность свободного перемещения стола внутри операционной.


Стол поставляется с комплектом приспособлений для общей хирургии (КПП-01).

Состав комплекта КПП-01 для общей хирургии

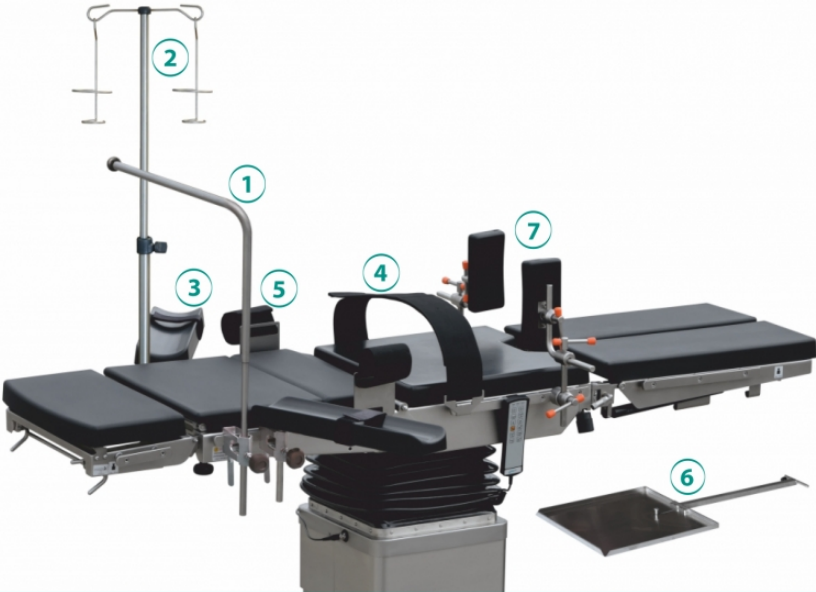


1 Наркозный экран - 1 шт.

Изготовлен из нержавеющей стали, регулируется по высоте. Крепится на боковых направляющих стола с помощью радиального зажима.

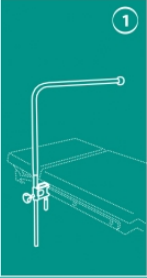

2 Штатив для вливаний - 1 шт.

Изготовлен из нержавеющей стали, регулируется по высоте. Два крючка, два съемных держателя для флаконов, встроенный крепежный зажим.

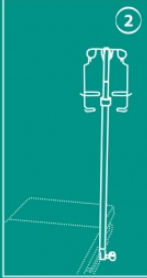


3 Столик для инъекций - 2 шт.

Профилированное рентгенопрозрачное ложе из интегрального полиуретана с зажимом и фиксирующим ремнем. Нержавеющие монтажные элементы. Регулируются положения вдоль панели стола, по высоте ложа, а также его поворот вокруг вертикальной оси.



4 Ремень для фиксации туловища - 1 шт.

Мягкий синтетический ремень шириной 100 мм с крепежными защелками, регулируется по длине.

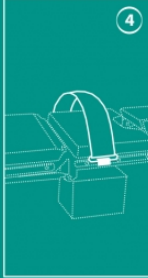

5 Рукодержатель - 2 шт.

Мягкий синтетический ремень шириной 100 мм с регулируемым нержавеющим креплением к боковой направляющей операционного стола.




6 Держатель рентгеновской кассеты - 1 шт.

Металлическая лопатка с длинной складной ручкой и фиксатором для продольной установки R-кассеты под рентгенопрозрачной столешницей стола.



7 Боковой упор - 2 шт.

Подушка 105x202 мм (интегральный полиуретан) с нержавеющей стойкой и зажимами для крепления к направляющей. Регулируется вдоль панели стола и двух вертикальных осей. Используется также как упор для плеча.

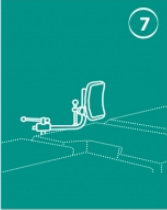

Гарантия - 24 месяца.

Для увеличения эффективности работы медперсонала мы рекомендуем дополнительно использовать уникальное решение для организации рабочего места медсестры: тележку медицинскую функциональную ТМ-1.

Применяется совместно с комплектами КПП:

				05		07	08
	10		12		14	15	16

17	18			21	22		
25	26	27		29	30	31	32
33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43					

Конструктивные особенности:

- Все открытые металлические поверхности стола, а также дополнительные приспособления изготовлены из нержавеющей стали;
- Основание стола защищено кожухом из особо прочного композитного материала, съемные обшивки колонны - нержавеющая сталь ;
- Съемная головная секция с одним наклоном и приводом;
- Наличие блокировки колес передвижного основания стола;
- Раздельные, съемные ножные секции с поворотом и наклоном;
- Литые съёмные подушки изготовлены по бесшовной технологии из интегрального пенополиуретана с антистатическим эффектом, и инновационной антимикробной обработкой (Ultra Fresh);
- Панель стола 5-секционная, рентгенопрозрачная;
- Возможность использования рентгеновского аппарата с С-образным штативом;
- Возможность ввода кассеты с рентгеновской пленкой со стороны головной секции;
- Возможность использования специальных дополнительных комплектов приспособлений.

Регулировки

- Привод подъема панели стола - гидравлический при помощи ножной педали
- Привод продольных наклонов панели - механический при помощи пневмопружины
- Привод боковых наклонов панели - механический при помощи пневмопружины
- Управление спинной секцией - при помощи пневмопружины
- Блокировка основания стола - ножная педаль
- Излом спинной секции (опция) - механический
- Привод подъема встроенного почечного валика (опция) - механический
- Регулировка наклона ножных и головной секций - при помощи пневмопружины

Длина стола, не менее	2100 мм
Длина стола без головной и ножной секций, не менее	1075 мм
Ширина стола по направляющим, не менее	550 мм
Ширина панели стола, не менее	500 мм
Минимальная высота поверхности стола (без учета толщины подушек), не более	710 мм
Максимальная высота поверхности стола (без учета толщины подушек), не менее	1005 мм
Длина основания стола, не более	1055 мм
Ширина основания стола со стороны головной секции, не более	435 мм
Ширина основания стола со стороны ножной секции, не более	560 мм
Высота основания стола, не более	190 мм
Глубина ниши основания стола со стороны ножной секции, не менее	60 мм
Максимальное выдвижение головной секции, не менее	50 мм
Продольный наклон панели (Тренделенбург/Антитренделенбург), не менее	- 30°/+ 30°
Боковой наклон панели, не менее	- 20°/+ 20°
Наклон спинной секции (вверх/вниз), не менее	+ 75°/- 45°
Наклон головной секции (вверх/вниз), не менее	+ 30°/- 35°
Наклон ножной секции (вверх/вниз), не менее	+ 30°/- 90°
Высота подъема подушек при изломе спинной секции (опция), не менее	105 мм
Высота подъема почечного валика (опция), не менее	140 мм
Безопасная рабочая нагрузка стола, не менее	160 кг
Безопасная рабочая нагрузка с ограничениями функций стола	250 кг
Вес стола (без комплекта съемных приспособлений), не более	190 кг

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Россия +7(495)268-04-70

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Киргизия +996(312)-96-26-47

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Казахстан +7(7172)727-132

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93