

Кресла медицинские многофункциональные КММ, КММП Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Россия +7(495)268-04-70

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Киргизия +996(312)-96-26-47

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Казахстан +7(7172)727-132

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

KMM



KMM кресло медицинское многофункциональное

Кресло медицинское многофункциональное KMM предназначено для удобного размещения пациента при проведении различных лечебных процедур.

Незаменимо для донорских центров, станций переливания крови, процедурных, косметологических, УЗИ-, а также других кабинетов в медицинских учреждениях. Большие возможности регулировки положения подлокотников в пространстве, а также их надежная фиксация в требуемой позиции.

Конструктивные особенности:

- Возможность выбора и установки угла наклона сиденья в одном из трех фиксированных положений (0° , 7° , 17°)
- Каркас панели кресла выполнен из конструкционных углеродистых сталей с полимерным порошковым покрытием
- Съемные приспособления выполнены из нержавеющей хромоникелевых сталей

- Высококачественный материал матраса. Толщина матраса 90 мм
- Регулируемые мягкие комфортные подлокотники. Широкий диапазон регулировок по высоте, ширине и углу разворота
- Встроенная пара колесных опор для перекатывания
- Удобный, регулируемый, съемный мягкий подголовник, поясничная подушка для удобства пациента
- Штатив для длительных вливаний можно размещать с нужной стороны (слева/справа), регулируется по высоте.

Регулировки:

- Регулировка высоты кресла - электрический привод (с пульта управления)
- Изменение наклона спинной секции - электрический привод (с пульта управления)
- Регулировка наклонов ножной секции - при помощи газовых пружин

Комплект поставки:

- Пульт управления
- Подголовник
- Подушка поясничная
- Рукодержатель
- Штатив для вливаний

Дополнительные принадлежности:

- Чехол защитный для ножных секций
- Держатель рулона одноразовых простыней

Гарантия - 24 месяца.

**Реальные цвета могут отличаться: полиграфическая печать или изображение на экране не обеспечивают их точного соответствия.*

Высота верхней точки сиденья кресла относительно поверхности пола в крайнем нижнем положении кресла, мм

- при угле наклона сиденья 0°	505±15
- при угле наклона сиденья 7°	550±15
- при угле наклона сиденья 17°	610±15
Высота верхней точки сиденья кресла относительно поверхности пола в верхнем положении кресла, мм	
- при угле наклона сиденья 0°	775±20
- при угле наклона сиденья 7°	820±20
- при угле наклона сиденья 17°	880±20
Ход подъемника кресла, мм, не менее	270
Высота кресла в крайнем нижнем положении с поднятой спинкой, мм, не более	1350
Длина кресла в крайнем нижнем положении с поднятой спинкой и опущенной ножной секцией, мм, не более	1250
Габаритная ширина кресла, мм, не более	810
Длина панели кресла в разложенном положении, мм, не менее	1860
Ширина ложа (сиденья, спинки и ножной секции), мм, не менее	565
Глубина сиденья, мм, не менее	470
Наклон спинки к плоскости сиденья (вверх/вниз), не менее:	70°/0°
Наклон сиденья вверх к горизонтали (фиксированный, переустанавливаемый), не менее	(0°, 7°, 17°)±3°
Наклон ножной секции вниз к плоскости сиденья, не менее	90°
Диапазон регулирования высоты штатива для вливаний, мм	1395...2270
Безопасная рабочая нагрузка, кг	160
Масса кресла, кг, не более	130
Напряжение питания электропривода, В	24
Внешнее напряжение питания кресла	~(230±23) В, (50±0,1) Гц

КММ-01



КММ-01 кресло медицинское многофункциональное

700.101 КММ-01 - подъём и опускание осуществляется электромеханическим приводом, регулировка положений спинки и ножной секции - газовыми пружинами.

Незаменимо для донорских центров, станций переливания крови, процедурных, косметологических, УЗИ-, а также других кабинетов в медицинских учреждениях, большие возможности регулировки положения подлокотников в пространстве, а также их надежная фиксация в требуемой позиции.

- Изменения положения спинки с помощью пневмопружины.
- Регулировка ножной секции - пневмопружиной.



Регулировка высоты кресла с пульта управления (с помощью электроприводов).



Пульт управления.



Встроенная пара колесных опор для перекатывания.



Удобный регулируемый съемный подголовник.

Гарантия 24 месяца.

**Реальные цвета могут отличаться: полиграфическая печать или изображение на экране не обеспечивают их точного соответствия.*

Высота верхней точки сиденья кресла
относительно поверхности пола в крайнем
нижнем положении кресла, мм

- при угле наклона сиденья 0°	505±15
- при угле наклона сиденья 7°	550±15
- при угле наклона сиденья 17°	610±15

Высота верхней точки сиденья кресла относительно поверхности пола в верхнем положении кресла, мм	
- при угле наклона сиденья 0°	775±20
- при угле наклона сиденья 7°	820±20
- при угле наклона сиденья 17°	880±20
Ход подъемника кресла, мм, не менее	270
Высота кресла в крайнем нижнем положении с поднятой спинкой, мм, не более	1350
Длина кресла в крайнем нижнем положении с поднятой спинкой и опущенной ножной секцией, мм, не более	1250
Габаритная ширина кресла, мм, не более	810
Длина панели кресла в разложенном положении, мм, не менее	1860
Ширина ложа (сиденья, спинки и ножной секции), мм, не менее	565
Глубина сиденья, мм, не менее	470
Наклон спинки к плоскости сиденья, не менее:	
вверх	70°
вниз	0°
Наклон сиденья вверх к горизонтали (фиксированный, переустанавливаемый), не менее	(0°, 7°, 17°)±3°
Наклон ножной секции вниз к плоскости сиденья, не менее	90°
Диапазон регулирования высоты штатива для вливаний, мм	1395...2270
Безопасная рабочая нагрузка, кг	160
Масса кресла, кг, не более	130
Напряжение питания электропривода, В	24
Внешнее напряжение питания кресла	~(230±23) В, (50±0,1) Гц
Максимальная потребляемая электрическая мощность, Вт	200

КММП



КММП кресло медицинское многофункциональное передвижное

Кресло КММП незаменимо для реабилитационных отделений, домов престарелых, процедурных, косметологических, УЗИ-, а также других кабинетов в медицинских учреждениях, удобный центральный тормоз, обеспечивающий безопасность пациента и персонала при манипуляциях, регулировка положений спинки и ножной секции как персоналом, так и самим пациентом.

Конструктивные особенности:

- Высокая маневренность. Неповоротные колеса диаметром 300 мм. Поворотные колеса диаметром 125 мм
- Синхронный наклон спинки и ножной секции
- Откидные подлокотники с фиксацией положения
- Центральный тормоз на заднюю пару колес
- Выдвижная подножка (КММП-02/КММП-03 - принадлежность)

Регулировки:

- Регулировка высоты - педальный гидравлический привод
- Наклон спинной и ножной секций - газовые пружины

Модификации:

- КММП-01 - с функцией «Помощь»* и регулировкой ножной секции пациентом
- КММП-02 - без функции «Помощь»* и регулировкой ножной секции пациентом
- КММП-03 - без функции «Помощь»* и без регулировки ножной секции пациентом


*функция «Помощь» - одновременный наклон сиденья и спинки кресла вперёд



Наклон вперед для посадки и вставания с кресла (принадлежность).



Удобные фиксированные положения подлокотников.

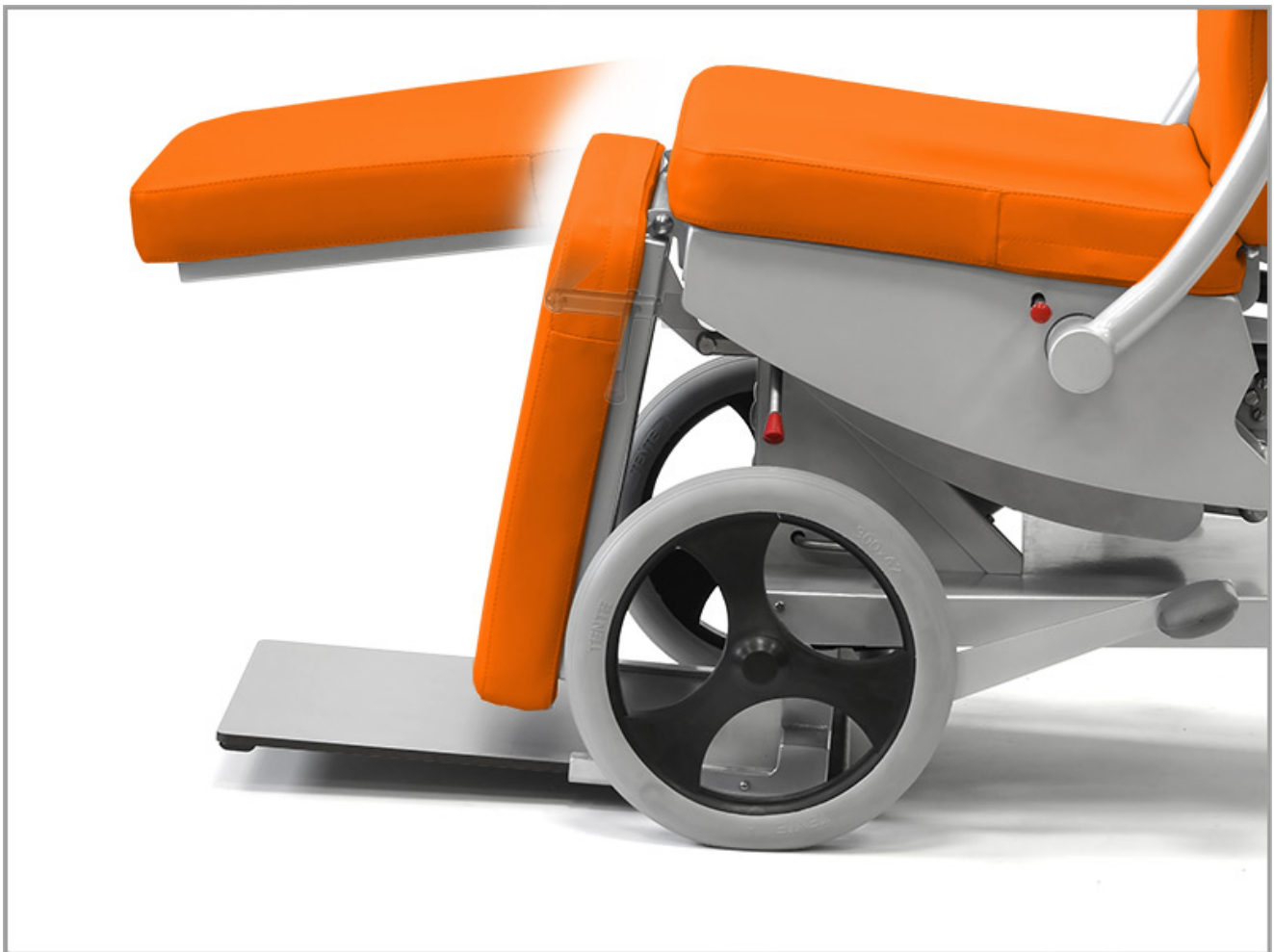

Независимая регулировка ножной секции пациентом (принадлежность).



Столик, боковые поддержки туловища и подголовник с боковыми ограничителями (принадлежность).



Подлокотник для инъекций и штатив (принадлежность).

Гарантия 24 месяца.

**Реальные цвета могут отличаться: полиграфическая печать или изображение на экране не обеспечивают их точного соответствия.*

Высота сиденья кресла от поверхности пола в нижнем положении, мм, не более	550
Высота сиденья кресла от поверхности пола в верхнем положении, мм, не менее	800
Высота кресла в нижнем положении с поднятой спинкой, мм, не менее	1270
Ширина ложа (сиденья, спинки и ножной секции), мм, не менее	500
Габаритная ширина кресла (по подлокотникам), мм, не менее	670
Глубина сиденья, мм, не менее	450

Длина кресла в разложенном положении, мм, не менее	1670
Длина кресла в нижнем положении с поднятой спинкой, мм, не менее	1100
Наклон спинки кресла вверх к плоскости сиденья:	
не менее	20°
не более	85°
Наклон сидения вверх к горизонтали, постоянный, не менее	7°
Наклон ножной секции вниз к плоскости сиденья:	
не менее	15°
не более	90°
Одновременный наклон сиденья и спинки при посадке и высадке пациента (функция «Помощь»), не менее:	
вверх	7°
вниз	15°
Фиксированные углы наклона подлокотников относительно сиденья:	
вверх	+25°, +90°
вниз	-25°
Номинальная нагрузка на кресло, кг	160±5
Масса кресла (без дополнительных приспособлений), кг, не более	90

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Россия +7(495)268-04-70

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Киргизия +996(312)-96-26-47

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Казахстан +7(7172)727-132

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93